

OPTiNA X WISKY

3 대 실 명 질 환 진 단 보 조 플 랫 폼

안저 영상 촬영부터 AI 분석 및 진단 보조까지

3대 실명질환 진단 정확도 95% 이상으로¹, 간단하고 신속한 안저검사가 가능합니다.




[Reference] 1. 임상시험결과보고서(AI-CTR-001~3).

* OPTiNA(품목명: 안저카메라) 및 WISKY(품목명: 안과 영상 검출·진단 보조 소프트웨어)는 '의료기기'로, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

OPTiNA X WISKY

3대 실명질환 진단 보조
AI Solution

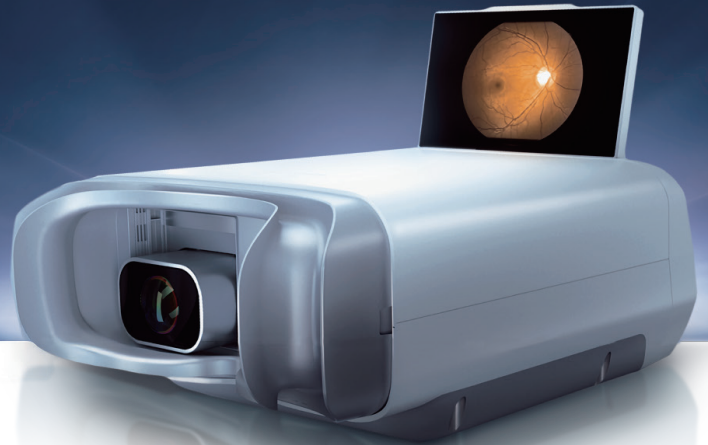

전자동 안저카메라

OPTiNA Genesis

OPTiNA는 동공을 통해 빛을 비춰 **망막과 시신경 등을 촬영하는 안저카메라**로, 반사된 빛을 이용해 안저 상태를 고해상도 사진으로 기록하는 기기입니다.

주요 기능: 오토포커싱 / 자동 촬영

휴대 가능한 2.7kg의 가벼운 무게

촬영 시 암실 불필요

내장 배터리 탑재로 전원 연결 없이 사용 가능

산동제 투여 불필요

안과 영상 검출 및 진단 보조 소프트웨어 혁신의료기기 지정

1,500만 화소의 고해상도 안저 영상 제공

의료진 개입 최소화

안과 영상 검출·진단 보조 소프트웨어

WISKY


WISKY는 안저카메라로 촬영한 환자의 안저 영상을 바탕으로 **당뇨병성망막병증, 황반변성, 녹내장 유무를 분석**하여 의료인의 진단 결정을 보조하는 데 사용하는 소프트웨어입니다.

3대 실명질환을 동시 판독하여 진단 결과를 6초 이내에 제공



병변 히트맵 제공(진단 결과 상세 설명 가능)

진단 결과지 즉시 출력 가능

[망막 사진 결과 및 병변 히트맵]

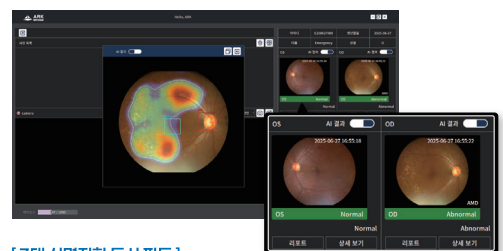

[3대 실명질환 동시 판독]

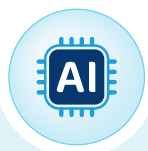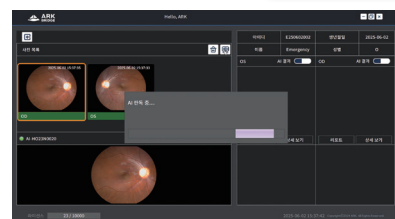

3종 망막질환 검진
SI 기술 보유



국내외 특허 23건 등
검증된 기술력



혁신의료기기, CE 인증 등
7개 인증



베트남, 인도네시아 등
5개국 글로벌 인허가 완료

WISKY의 높은 진단 정확도

WISKY와 안과 전문의의 3대 실명질환 판독을 비교한 결과,
WISKY 판독의 민감도 및 특이도는 임상 통과 기준*을 충족하였습니다.¹

1차 유효성 평가	 나이관련 황반변성	 당뇨병성망막병증	 녹내장
민감도 질병 보유자가 양성으로 나온 비율	95.24% (95% CI, 91.83 - 97.52%)	91.39% (95% CI, 87.64 - 94.30%)	93.86% (95% CI, 90.46 - 96.32%)
특이도 질병 비보유자가 음성으로 나온 비율	99.60% (95% CI, 97.77 - 99.99%)	99.29% (95% CI, 97.46 - 99.91%)	98.65% (95% CI, 96.58 - 99.63%)

*임상 통과 기준: 민감도 및 특이도의 95% CI 하한치가 다음 기준 이상: 나이관련 황반변성 75%, 당뇨병성망막병증 81%, 녹내장 70%

WISKY는 3대 실명질환 진단에서
95% 이상의 높은 진단 정확도를 보였습니다.¹

2차 유효성 평가	 나이관련 황반변성	 당뇨병성망막병증	 녹내장
정확도 전체 대상자 중 양성과 음성을 올바르게 진단한 비율	97.40% (95% CI, 95.59 - 98.61%)	95.21% (95% CI, 93.14 - 96.79%)	96.26% (95% CI, 94.40 - 97.64%)
양성예측도 양성인 대상자가 실제로 질병이 있는 비율	99.59% (95% CI, 97.71 - 99.99%)	99.28% (95% CI, 97.43 - 99.91%)	98.57% (95% CI, 96.37 - 99.61%)
음성예측도 음성인 대상자가 실제로 질병이 없는 비율	95.37% (95% CI, 92.05 - 97.58%)	91.50% (95% CI, 87.80 - 94.37%)	94.19% (95% CI, 90.98 - 96.52%)

[Study design¹] 안과 전문의 3명이 교차검증하여 2명 이상의 진단이 일치한 안저사진을 참조표준으로 선정하고, 참조표준의 WISKY 판독결과를 평가하였음.

[Reference] 1. 임상시험결과보고서(AI-CTR-001~3).

OPTiNA & WISKY

EDI 코드 및 급여 기준

분류 번호² 및 EDI 코드

분류		나-667가
한글명/영문명		기본 안저촬영 [편측] / Fundus Photography
EDI		E6670 (편측)
종별 수가 2026.01.01 기준	상급 종합병원	6,601원 (양안 검사 시 13,202원)
	종합병원	6,314원 (양안 검사 시 12,628원)
	병원	6,027원 (양안 검사 시 12,054원)
	의원	6,550원 (양안 검사 시 13,100원)

상병코드²

		상병코드	분류명	비고
환자 본인 해당 질환 사전 인지 시	녹내장	H40.0 H40.9	녹내장 의심 상세불명의 녹내장	질병 인지, 원인 불명(혹은 모를 경우)
	황반변성	H35.30 H35.31 H35.39	연령과 관련된 비삼출성 황반변성 연령과 관련된 삼출성 황반변성 상세불명의 황반변성	삼출성: 삼출물과 혈액이 혈관 밖으로 누출 질병 인지, 원인 불명(혹은 모를 경우)
	당뇨병성	E10 E10-E14 E11 H36.0*	1형 당뇨병 당뇨병 2형 당뇨병 당뇨병성망막병증	4단위 및 5단위의 숫자 30, 31, 32, 33에 해당되는 E10-E14+
기저질환 보유 시	고혈압	I10 I10.1 I10.9	본태성(원발성) 고혈압 악성 고혈압 기타 및 상세불명의 원발성 고혈압	
	당뇨병	E10 E10-E14 E11	1형 당뇨병 당뇨병 2형 당뇨병	
그 외 모든 경우	정상 (혹은 모를 경우)	H35.9	상세불명의 망막장애	

*발현 증세에 대한 코드

[Reference] 2. 의·치과, 한방 수가파일('25.11.).

OPTiNA X WISKY



편리성

OPTiNA는 간단한 조작으로 자동 촬영이 가능하며,
WISKY는 AI 분석으로 수 초 이내에¹ 진단 결과를 제공합니다.



정확성

안과 전문의와 3대 실명 질환 판독 결과를 비교한
허가 임상에서 WISKY는 95% 이상의 정확도를 보였습니다.¹



접근성

의료진 누구나 안저촬영을 할 수 있으며,³ 수가 청구도 가능합니다.⁴
기본 안저촬영(E6670) 수가 청구 가능 (2025.01.01 기준 의원 단가: 12,900원)⁴

[References] 1. 임상시험결과보고서(AI-CTR-001~3). 2. 의·처과, 한방 수가파일('25.1.1). 3. OPTiNA_식약처 허가사항(품목허가일 23.08.30). 4. 건강보험심사평가원 repository>HIRA 발간>건강보험요양급여비용 (2025년 1월판).